

Tisková zpráva
č. 19/2024

Komfortní a účinná příprava laboratorního skla ve velkokapacitních myčkách Miele

- ▶ Výškově nastavitelný vozík umožňuje práci bez stresu
- ▶ O 50 % větší kapacita pro drobné a středně velké laboratorní sklo

V podobě velkokapacitních laboratorních myček řady PLW 86 nabízí Miele výkonnou konstrukční řadu, jejíž přístroje se dají pohodlně osadit díky novým zavážecím vozíkům. To zvyšuje kapacitu a umožňuje práci bez stresu – a to i zaměstnancům malého vzrůstu.

V osvědčených přístrojích se nové varianty programů a vyšší otáčky čerpadel postarají o spolehlivou přípravu. Tím se myčky flexibilně přizpůsobují potřebám velkých laboratoří a umožňují tam vysoce efektivní provoz – zvláště díky oběhovému čerpadlu, jehož otáčky se variabilně přizpůsobí požadavkům průběhu příslušného programu. Během fáze čištění se dosáhne plného výkonu a pro následné mytí se otáčky sníží. Tím klesne nejen spotřeba vody, ale také spotřeba proudu a čisticí chemie při mytí.

Výška vozíku ATT 86 se dá automaticky a plynule měnit v rozsahu 40 centimetrů, takže obsluhující personál dobře dosáhne do horních pater.

Pro motorem podporované zvedání a spouštění je k dispozici snadno ovladatelné ruční řízení. Vozík pojme hmotnost až 95 kilogramů, což představuje značnou úlevu v každodenní práci.

Naproti tomu vozík APLW 511 poskytuje ve třech úrovních místo až pro devět modulů – pro spolehlivé vyčištění různého laboratorního skla zevnitř i zvenku. O to se postarají injektorové trysky, které se nasadí do modulů a připojí přímo k vodnímu okruhu. Osvědčený systém plnění EasyLoad přitom zvyšuje kapacitu: tak lze třeba čistit a sušit současně 324 lahviček o objemu 100 mililitrů – nebo místo toho 216 takových lahviček plus 294 vialek. Ve výsledku se především u malého a středně velkého laboratorního skla zvýší kapacita o více než 50 procent.





Foto 1: Vysoce účinná laboratorní myčka z řady PLW 86 od Miele. Osvědčuje se především ve velkých laboratořích a lze ji flexibilně osadit prostřednictvím systému „EasyLoad“. (Foto: Miele)



Foto 2: Zvedat a spouštět se dá vozík ATT 86 snadno ovladatelným ručním řízením. Výšková nastavitelnost umožňuje pracovníkům různého vzrůstu dosáhnout do horních pater. (Foto: Miele)

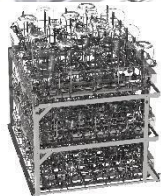


Foto 3: Tři úrovně plnění až pro devět modulů, které dovolují flexibilní osazení laboratorním sklem: Vozík APLW 511 zvyšuje kapacitu velkokapacitních laboratorních myček řady PLW 86 od Miele. (Foto: Miele)